


# SIRINGA UNIMATIC DA 2 ML

**CODICE 050591B**

**ISTRUZIONI PER UTILIZZARE, A RICHIESTA, LA SIRINGA DOSATRICE UNIMATIC COME SIRINGA ASPIRATRICE.**

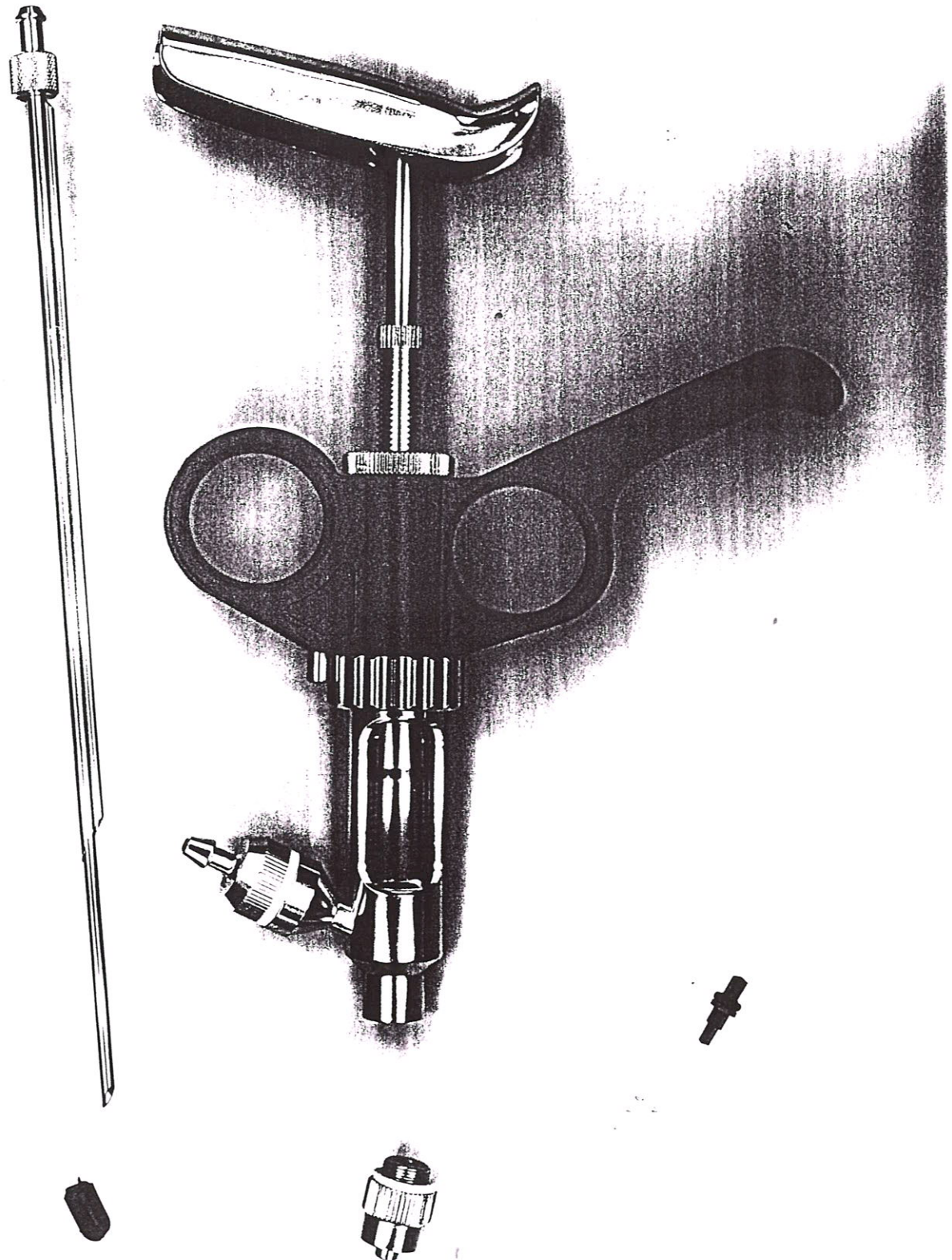

- SVITARE LA GHIERA ZIGRINATA. ••• TOGLIERE LA MOLLA E LA VALVOLA. ••• RIAVVITARE.
- TOGLIERE IL CAPPuccio NERO DALLA PUNTA DELL'AGO E INSERIRLO SULL'ATTACCO DI ASPIRAZIONE LATERALE.